




VELA Tango

MODEL: 300, 300E & 310E

Handleiding nr. 105481

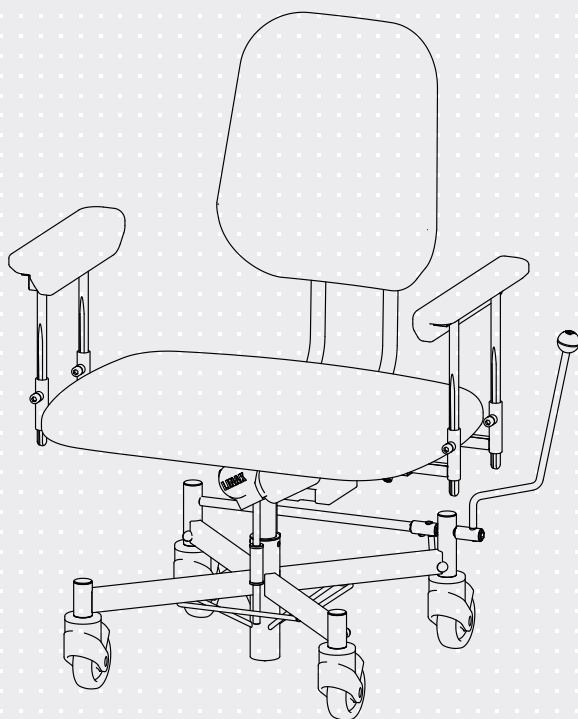

Het ontwerp van de stoel is afhankelijk van het model

INHOUDSOPGAVE

1.0. INLEIDING	3
1.1. WAARSCHUWINGEN	4
1.2. PROBLEEMOPLOSSING	5
1.3. VELA TANGO MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING	6
1.3.1. Stroomaansluiting	6
1.3.2. Emc	6
1.4. LABELS GEBRUIKT OP DE STOEL	6
1.5. VEILIGHEID	7
1.5.1. Toepassing	7
1.5.2. Transport	7
1.6. GARANTIE	8
1.7. DE STOEL UITPAKKEN	8
1.8. ONDERHOUD	8
1.8.1. Wielen	8
1.8.2. Frame	8
1.8.3. Bekleding	8
1.8.4. Levensduur	9
1.9. RECYCLING	9
2.0. GEBRUIKERSHANDLEIDING	10
2.0.1. Hoogte verstellen (El)*	10
2.0.2. Hoogte verstellen (Gas)*	10
2.0.3. Afstandsbediening (El)*	10
2.0.4. De zitdiepte verstellen	10
2.0.5. De hoek van de rugleuning verstellen	11
2.0.6. De hoogte van de rugleuning verstellen	11
2.0.7. De hoogte van de arMLEuning verstellen	11
2.0.8. De breedte van de arMLEuning verstellen	11
2.0.9. Rem	12
2.0.10. Opladen (El)*	12
2.0.11. Wandelbeugel*	12
2.0.12. Elektrische rem (El)*	12

1.0. INLEIDING

BESTE KLANT

Gefeliciteerd met uw nieuwe VELA-stoel! We zijn ervan overtuigd dat deze stoel u dagelijks comfort en plezier zal bezorgen. Deze gebruikershandleiding bevat nuttige informatie over het instellen en het onderhoud van de stoel.

Belangrijk

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor gebruik. Deze handleiding is ook beschikbaar op de website van VELA, www.vela.eu, waar u ook andere relevante informatie kunt vinden.

Als u vragen heeft, fouten of tegenslagen ondervindt, neem dan contact op met uw VELA leverancier.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.

VELA

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Denemarken
www.vela.eu

1.1. WAARSCHUWINGEN



Gebruik	Stop in geval van een allergische reactie met het gebruik van de stoel en raadpleeg een arts
Gebruik	Gebruik alleen originele reserveonderdelen van VELA
Gebruik	Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de stoel op te laden
Gebruik	Breng geen wijzigingen aan de accessoires die bij de stoel worden geleverd aan
Gebruik	Gebruik de stoel alleen voor het beoogde doel
Gebruik	Zet de stoel altijd op de rem als u gaat zitten of opstaan
Gebruik	Gebruik de stoel nooit op ongelijkmatige oppervlakken, de stoel kan instabiel worden hierdoor
Gebruik	Onderhoud anders dan schoonmaken moet altijd worden uitgevoerd door een professional
Gebruik	Voer geen onderhoud uit terwijl de stoel in gebruik is
Gebruik	Volg altijd de aanbevolen onderhouds- en reinigingsinstructies
Gebruik	De functies van de stoel zijn bedoeld voor de gebruiker. Alleen de gebruiker of getrainde professionals mogen de stoel aanpassen terwijl de gebruiker erin zit
Gebruik	Gebruik de elektrische hoogtevinstelling nooit langer dan twee minuten per keer
Gebruik	In het geval van een elektrische fout of onbedoelde hoogtevinstelling, druk gedurende 10 seconden gelijktijdig op beide hoogtevinstellings knoppen
Gebruik	Er bestaat risico op het schaven of beknellen van vingers in bewegende onderdelen. Gebruik de stoel daarom nooit als iemand met de stoel bezig is
Stikkingsgevaar	Verstikkingsgevaar op kleine onderdelen. Laat kinderen nooit met de stoel spelen, omdat kleine onderdelen los kunnen raken
Stikkingsgevaar	Indien de stoel is voorzien van elektrische hoogtevinstelling zijn er kabels aanwezig. Laat kinderen hier nooit mee spelen
Elektrische bescherming	Het gebruik van andere kabels dan de standaard kabels kan de elektrische emissie verhogen of de elektrische immuniteit verminderen
Elektrische bescherming	Plaats de stoel niet in de buurt van apparaten die elektrische storingen kunnen veroorzaken
Elektrische bescherming	De stoel mag alleen worden gebruikt met accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, omdat anders elektromagnetische interferentie kan optreden
Elektrische bescherming	Als de stoel onbedoeld beweegt of niet werkt zoals verwacht, zoek dan een andere locatie voor de stoel

1.2. PROBLEEMOPLOSSING

Storing	Mogelijke oorzaak en oplossing
Elektrische hoogteverstelling werkt niet	De batterij van de stoel is leeg. Laad de batterij op met de meegeleverde oplader
Handmatige hoogteverstelling werkt niet	De stoel is te zwaar of ongelijkmatig belast. Probeer de hoogte aan te passen zonder in de stoel te zitten. Als dit niet werkt, vermoedelijk is de gasveer defect en moet deze worden vervangen. Neem contact op met uw VELA-dealer
De remfunctie werkt niet	De rem is niet geactiveerd. Zie sectie 2.0.9.
De armleuning lijkt los te zitten	Mogelijk zit een van de stelschroeven los. Draai de stelschroef vast
De stoel rolt slecht	De wielen zijn geblokkeerd. Reinig de wielen, verwijder de stofresten en dergelijke.

Als het bovenstaande uw probleem niet oplost, neem dan contact op met uw VELA-leverancier.

1.3. VELA TANGO MET ELEKTRISCHE HOOGTEVERSTELLING

1.3.1. STROOMAANSLUITING

Voltage: 24Vdc
 Spanning: 0.5A
 Vermogen: 12VA

1.3.2. EMC

Elke VELA-stoel met elektrische functionaliteit is getest en voldoet aan de huidige eisen met betrekking tot elektromagnetische straling (EMC-voorschriften). De stoel is getest volgens de volgende specificaties:

:: Emissieklasse CISPR 11, Groep 1, Klasse B

Raadpleeg www.vela.eu voor meer details

1.4. LABELS GEBRUIKT OP DE STOEL

<p>Waarschuwing</p>	<p>Risico op beknellingen: Houd handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen</p>	
<p>Icoon</p>	<p>Lees de 'Gebruiksaanwijzing' voor gebruik</p>	
<p>Icoon</p>	<p>Gebruikt onderdeel: Type B cf. IEC60601-1 voor de volgende delen van de stoel:</p> 	
<p>Labels</p>	<p>60 x 22,5 mm</p> <p>Dit label is alleen van toepassing op stoelen met elektrische functionaliteit: De stoel is IP21 gekeurd, wat betekent dat de stoel beschermd is tegen waterdruppels en onverwachte bewegingen waarbij vingers een gevaarlijk onderdeel aanraken.</p>	 <p>The label contains the following information: - Model name: <Model name> - Model ref. no.: <Model ref. no.> - Manufacturer: <Manufacturer> - Address: <Address> - Webpage: <Webpage> - Production date/order no.: <Production date/order no.> - UDI: (XX) xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxxx - CE mark and MEDICO logo with 'Safe working load' text. - Instructions: Follow instructions for use. - Input: 24V, 0.5A. - Storage limits: -20°C to 60°C. - Duty cycle: 10%, max. 2min/18min. - Blade fuse: 10A/32V.</p>

Labels op de stoel moeten worden gelezen op een afstand van ca. 40 cm onder normale daglicht omstandigheden. Voor labels met betrekking tot de werking van de stoel verwijzen we naar sectie 2.0.

ALGEMEEN

1.5. VEILIGHEID

Deze stoel is CE-gemarkeerd en voldoet aan de geldende EU-regelgeving. De stoel is vervaardigd door: VELA, Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Denemarken.

De VELA Tango 300/310 met elektrische functionaliteit voldoet aan alle veiligheidsvereisten volgens IEC 60601-1, inclusief vereisten voor EMC volgens IEC60601-1-2.

1.5.1. TOEPASSING

Deze stoel is voor gebruik binnenshuis, dit voor zittend gebruik.

- :: De stoel is niet ontworpen om op te staan
- :: Bij het gaan zitten of opstaan moet de wielrem altijd geactiveerd zijn

Alle standaardvarianten van VELA Tango 300* zijn getest en goedgekeurd voor een maximale belasting van 200 kg.

*VELA Tango 300 met gasveer zijn getest en goedgekeurd voor een maximale belasting van 175 kg.

Alle varianten van VELA Tango 310 zijn getest en goedgekeurd voor een maximale belasting van 300 kg.

1.5.2. TRANSPORT

Gebruik altijd de stoelrem wanneer u de stoel met de auto, het vliegtuig of een ander vervoermiddel vervoert. De stoel is niet goedgekeurd voor gebruik als passagiersstoel in enig vervoermiddel en mag niet als zodanig worden gebruikt.

De stoel is ontworpen om te worden vervoerd onder de volgende

omgevingsomstandigheden:

Temperatuur: - 20 ° C tot + 60 ° C

Vochtigheid: 15-95%

Laat de stoel 24 uur staan voor gebruik als deze onder -10 °C is opgeslagen.

1.6. GARANTIE

VELA kent een claimrecht toe onder toepasselijk recht in het land waar de stoel is aangekocht. Dit recht is alleen van toepassing bij gebruik van originele reserveonderdelen en accessoires, evenals maatwerk door professionals.

Let op: ook wanneer rechtstreeks met VELA een exclusieve contractuele overeenkomst is gesloten, gelden deze voorwaarden!

VELA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het product of de gebruiker veroorzaakt door:

- :: Transport
- :: Misbruik
- :: Normale slijtage
- :: Verkeerd gebruik
- :: Gebruik van reserveonderdelen en accessoires die geen originele VELA-producten zijn
- :: Aanpassingen door onbevoegde servicemonteurs

1.7. DE STOEL UITPAKKEN

De stoel wordt geleverd in een milieuvriendelijke en recyclebare verpakking.

Neem bij gebreken of transportschade aan de stoel direct contact op met uw VELA-leverancier. Probeer in dergelijke gevallen de stoel niet te gebruiken of zelf te repareren.

U ontvangt:

- :: de VELA-stoel
- :: gebruiksaanwijzing
- :: stroomadapter (enkel voor stoelen met elektronische functionaliteit)

1.8. ONDERHOUD

We raden een jaarlijkse inspectie van de stoel aan om defecte of versleten onderdelen te identificeren. Alle verwijderbare onderdelen moeten regelmatig worden vastgedraaid. Op www.vela.eu vind je verschillende handleidingen.

1.8.1. WIELEN

We raden u aan regelmatig de wielen te controleren en eventuele stofresten enz. te verwijderen.

1.8.2. FRAME

Reinig met lauw water en voeg indien nodig een pH-neutraal reinigingsmiddel toe.

1.8.3. BEKLEDING

Stof: Reinig door chemisch reinigen, met meubelreiniger of met water en een hand gewrongen doek.

Synthetische stof of leder: Reinig met water of milde zeep met een hard uitgewrongen doek.

Leder: Reinigen door te stofzuigen met een zachte borstel. Gebruik geen reiniger.

Let op: op www.vela.eu vindt u reinigingsinstructies voor al onze standaard bekledingstypes.

1.8.4. LEVENSDUUR

Uw VELA-stoel kan door een andere persoon worden hergebruikt wanneer u deze niet meer nodig heeft, mits de stoel vooraf wordt onderhouden door een technicus.

De levensverwachting van de stoel bedraagt vijf jaar bij regelmatig en correct gebruik, zolang VELA, uw VELA-leverancier of een getrainde professional een jaarlijkse inspectie uitvoert met vervanging van de versleten onderdelen.

1.9. RECYCLING

Dit product bevat recyclebare materialen. Daarom moet het product worden gerecycled in overeenstemming met de lokale regelgeving en niet samen met het gewone huisvuil. Een correcte recyclage voorkomt negatieve effecten op mens en milieu.

Let op: de elektronische apparatuur en bijbehorende batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu als het afval niet op de juiste manier wordt gerecycleerd.

Elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het onderstaande pictogram. Dit pictogram geeft aan dat het onderdeel niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden wegge-

gooid, maar apart moeten worden ingezameld.



Het is belangrijk dat u gebruikte batterijen correct recycleert volgens de richtlijnen die van toepassing zijn in uw land. Op deze manier helpt u ervoor te zorgen dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en geen onnodige schade toebrengen aan het milieu.

2.0. GEBRUIKERSHANDLEIDING

De gasveer en het elektrische hefmechanisme dienen alleen te worden vervangen door een VELA-technicus of een persoon met een opleiding op dit gebied.

2.0.1. HOOGTE VERSTELLEN (EL)*

De hoogte kan worden veresteld door te drukken op de schakelaar aan de zijkant van de rechter of linker armléuning.

Opmerking: De VELA Tango El is ook verkrijgbaar met hoogteverstelling via een afstandsbediening (zie item 2.0.3).

2.0.2. HOOGTE VERSTELLEN (GAS)*

De hoogte kan worden veresteld door de voorste hendel aan de rechterkant naar boven te trekken.

Opmerking: De VELA Tango 300 is verkrijgbaar met een vaste hoogte. De zithoogte van deze stoel kan niet worden veresteld.



2.0.3. AFSTANDSBEDIENING (EL)*


Met de knoppen op de voorzijde van de afstandsbediening kunt u de hoogte van de stoel verstellen.

2.0.4. DE ZITDIEPTE VERSTELLEN

U verstelt de zitdiepte door de twee Unbrako-bouten onder de zitting (naast de arm van de rugléuning) los te draaien, waarna u de rugléuning naar voren en naar achteren kunt bewegen.


Vergeet niet de Unbrako-bouten na het verstellen van de zitdiepte weer goed vast te draaien.

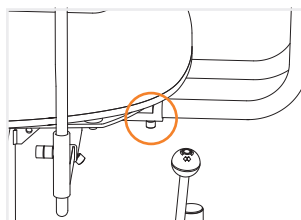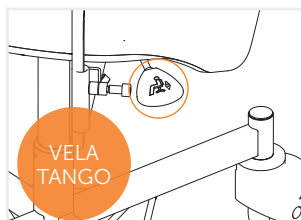

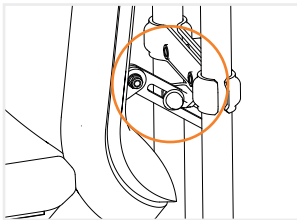


2.0.5. DE HOEK VAN DE RUGLEUNING VERSTELLEN

U stelt de hoek van de rugleuning in door de kleine schroef op de bout aan de achterkant los te draaien, waarna u de rugleuning in de gewenste hoek kunt stellen. Vergeet niet om de bout weer stevig aan te draaien nadat u de juiste hoek hebt afgesteld.

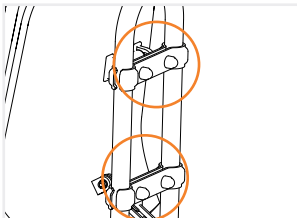


2.0.6. DE HOOGTE VAN DE RUGLEUNING VERSTELLEN

Voor het afstellen van hoogte van de rugleuning draait u de vier Unbrako-bouten achter de arm van de rugleuning los. Nadat de schroeven zijn losgedraaid, kunt u de hoogte van de rugleuning verstellen. Vergeet niet de Unbrako-bouten vervolgens weer goed vast te draaien.

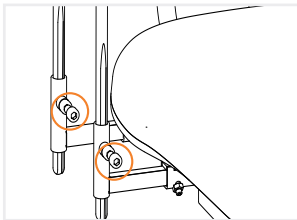

2.0.7. DE HOOGTE VAN DE ARMLEUNING VERSTELLEN

De hoogte van de armleuning kan worden versteld door de twee schroeven onder de stang van de armleuning los te draaien en de hoogte van de armleuning te verstellen. Vergeet niet de schroeven vervolgens weer aan te draaien.

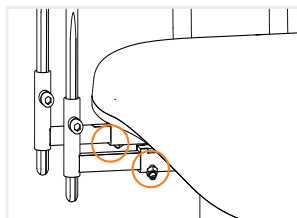


2.0.8. DE BREEDTE VAN DE ARMLEUNING VERSTELLEN

Verstel de leuning door de twee schroeven onder de zitting los te draaien. Vergeet niet de schroeven vervolgens weer aan te draaien.


Opmerking: De armleuningen mogen tot aan de rode stopmarkering worden versteld.

* Afhankelijk van het model

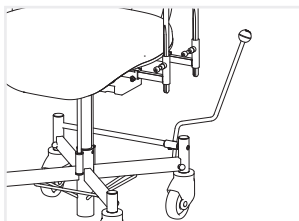


2.0.9. REM

De rem van de VELA Tango wordt geactiveerd door de hendel aan de zijkant van de stoel naar voren te duwen. U kunt de stoel van de rem afhaken door de hendel terug omhoog te trekken.
Opmerking: De rem kan rechts of links gemonteerd worden geleverd.

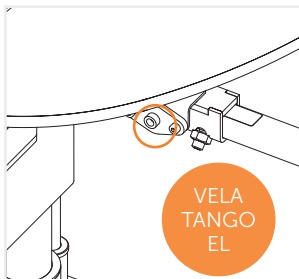


2.0.10. OPLADEN (EL)*

Dagelijks opladen wordt aangeraden. U laadt de stoel op door de lader te plaatsen in de schakelaar die zich aan de achterzijde de stoel, rechts onder de zitting bevindt. Wanneer de stoel wordt opgeladen, brandt er een lichtgeel led-lampje. Is de stoel volledig opgeladen, dan brandt er een groen led-lampje.
Opmerking: De stoel mag niet worden gebruikt tijdens het opladen.

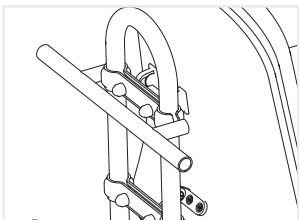

2.0.11. WANDELBEUGEL*

Wandelbeugel voor het vervoeren van een persoon in de stoel. De wandelbeugel is vastgemaakt aan de bovenste klem in de rugleuning.

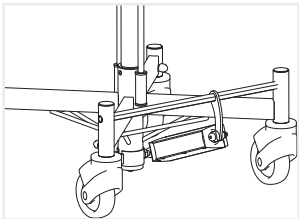

2.0.12. ELEKTRISCHE REM (EL)*

VELA Tango met elektrische rem wordt geremd en van de rem afgehaald middels de afstandsbediening. Het wordt aangeraden om de rem volledig in te drukken of uit te zetten als u deze functie gebruikt.
Opmerking: Deze functie kan alleen worden bediend middels de afstandsbediening.

* Afhankelijk van het model